

POBIERANIE I TRANSPORT PRÓBEK KAŁU DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

CZEŚĆ A - Badania dla osób zdrowych



Płatność kartą lub gotówką. Zaleca się przygotować odliczoną kwotę należności.

Informacje ogólne

- Wymazówki z podłożem transportowym oraz zlecenia na badania należy pobrać w WSSE w Bydgoszczy w Punkcie Przyjmowania Próbek i Wydawania Wyników
- W celu wykonania badania pobrać trzy próbki kału z trzech kolejnych dni/ wypróżnień
- W razie trudności z uzyskaniem materiału do badań, maksymalny odstęp pomiędzy dostarczeniem pierwszej i trzeciej próbki nie może przekroczyć 7 dni
- **Pobrane próbki do badań** należy dostarczyć do Punktu Przyjmowania Próbek i Wydawania Wyników WSSE w Bydgoszczy (parter, budynek E). Dni przyjmowania materiału badań:
 - **Poniedziałek 7:30 - 12:00 i 14:00 - 17:00**
 - **Wtorek – Środa 7:30 - 12:00**
- **Wyniki badań** można odbierać po 4 dniach roboczych od momentu dostarczenia ostatniej próbki:
 - **W WSSE w Bydgoszczy codziennie od 7:30 do 14:00, w poniedziałki do 17:00,**
- Przy odbiorze wyniku należy okazać dowód tożsamości, a także upoważnienie do odbioru wyników badań, jeśli zaistniała taka konieczność
- Zaleca się przygotować odliczoną kwotę należności

Instrukcja pobrania materiału

1. Kał należy oddać do czystego suchego naczynia
2. Pobrać materiał poprzez kilkukrotne zanurzenie i obrócenie bawełnianego końca wymazówki w kale (Ryc.1)
3. Wymazówkę umieścić w probówce z podłożem transportowym, tak aby pobrany materiał był w nim zanurzony (Ryc.2). Źle pobrany materiał dyskwalifikuje próbkę do badań!
4. Opisać probówkę imieniem i nazwiskiem oraz datą pobrania, przechowywać w warunkach chłodniczych (2-8°C)
5. Tak pobrane próbki należy dostarczyć w ciągu 48 h od pobrania pierwszego wymazu

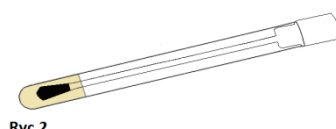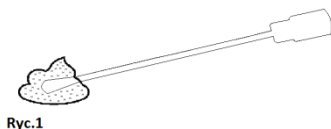

Uwaga!



- **Nie należy umieszczać kału w probówce z podłożem transportowym!**
- W probówce należy umieścić tylko i wyłącznie wymazówkę, która posiada na całej powierzchni wacika widoczny **śląd kału**.
- Źle pobrany materiał dyskwalifikuje próbkę do badań!

CZEŚĆ B – Badania od nosicieli, ozdrowieńców i osób ze styczności

- Wymazówki z podłożem transportowym oraz zlecenia na badania należy pobrać w PSSE w Bydgoszczy

Instrukcja pobrania materiału

1. Kał należy oddać do czystego suchego naczynia
2. Pobrać materiał poprzez kilkukrotne zanurzenie i obrócenie bawełnianego końca wymazówki w kale (Ryc.1)
3. Wymazówkę umieścić w probówce z podłożem transportowym, tak aby pobrany materiał był w nim zanurzony (Ryc.2). Źle pobrany materiał dyskwalifikuje próbkę do badań!
4. Opisać probówkę imieniem i nazwiskiem oraz datą pobrania, przechowywać w warunkach chłodniczych (2-8°C)
5. Tak pobrane próbki należy dostarczyć w ciągu 48 h od pobrania pierwszego wymazu

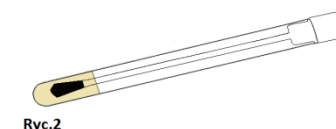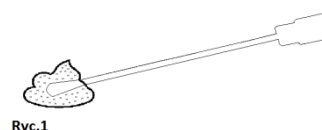

Uwaga!

- Nie należy umieszczać kału w probówce z podłożem transportowym!
- W probówce należy umieścić tylko i wyłącznie wymazówkę, która posiada na całej powierzchni wacika widoczny ślad kału.
- Źle pobrany materiał dyskwalifikuje próbkę do badań!

CZEŚĆ C – Badania od nosicieli i ozdrowieńców w kierunku wykrywania pałeczek *Enterobacterales* wytwarzających karbapenemazy

- Wymazówki z podłożem transportowym oraz zlecenia na badania należy pobrać w PSSE

Wymaz z odbytu/kału pobiera się na wymazówkę i umieszcza w podłożu transportowym wchodzącym w skład zestawu.

Instrukcja pobrania materiału:

1. Wymaz z odbytu:


Pobrać wymaz ostrożnie wkładając wymazówkę na głębokość około 1 cm poza zwieracz odbytu i kilkakrotnie obrócić. Wymazówkę włożyć do podłoża transportowego (próbówka), dokładnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której materiał został pobrany oraz datą i godziną pobrania. Tak pobraną próbkę można przechowywać maksymalnie do 48 godzin w warunkach chłodniczych ($2-8^{\circ}\text{C} \pm 1$).

2. Wymaz z kału:

- Kał należy oddać do czystego suchego naczynia
- Pobrać materiał poprzez kilkakrotne zanurzenie i obrócenie bawełnianego końca wymazówki w kale (Ryc.1)
- Wymazówkę umieścić w próbówce z podłożem transportowym, tak aby pobrany materiał był w nim zanurzony (Ryc.2). Źle pobrany materiał dyskwalifikuje próbkę do badań!
- Opisać próbkę imieniem i nazwiskiem oraz datą pobrania, przechowywać w warunkach chłodniczych ($2-8^{\circ}\text{C}$)
- Tak pobrane próbki należy dostarczyć w ciągu 48 h od pobrania pierwszego wymazu



Ryc.1

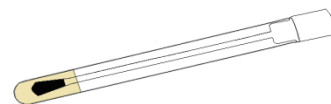

Ryc.2

Uwaga!

- Nie należy umieszczać kału w próbówce z podłożem transportowym!
- W próbówce należy umieścić tylko i wyłącznie wymazówkę, która posiada na całej powierzchni wacika widoczny ślad kału.
- Źle pobrany materiał dyskwalifikuje próbkę do badań!