



KRYTERIA PRZYJĘCIA PRÓBEK DO BADAŃ

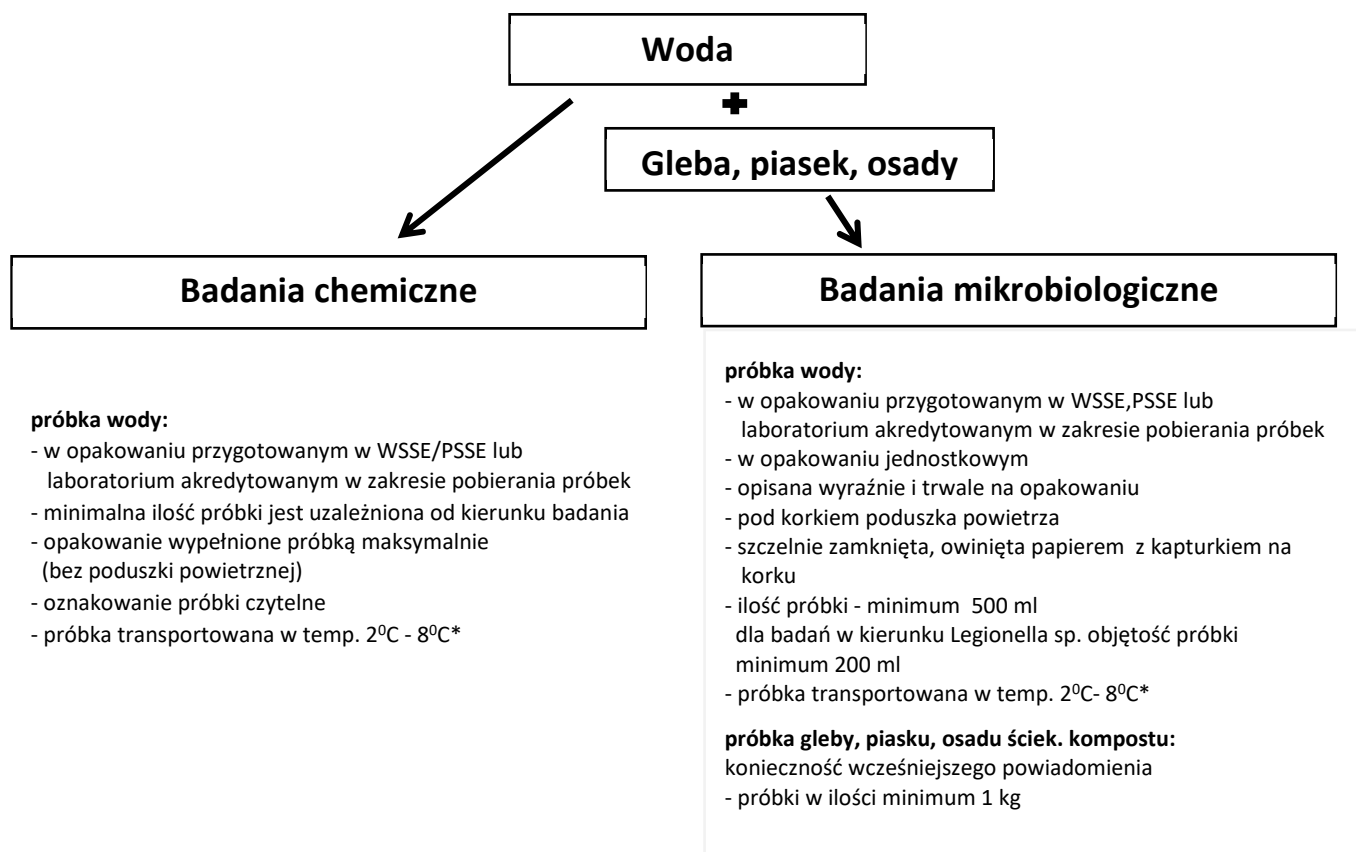

* Podane kryteria temperaturowe obowiązują w przypadku transportu próbek powyżej 4h. Do 4h próbka powinna być transportowana w warunkach ciągłego schładzania

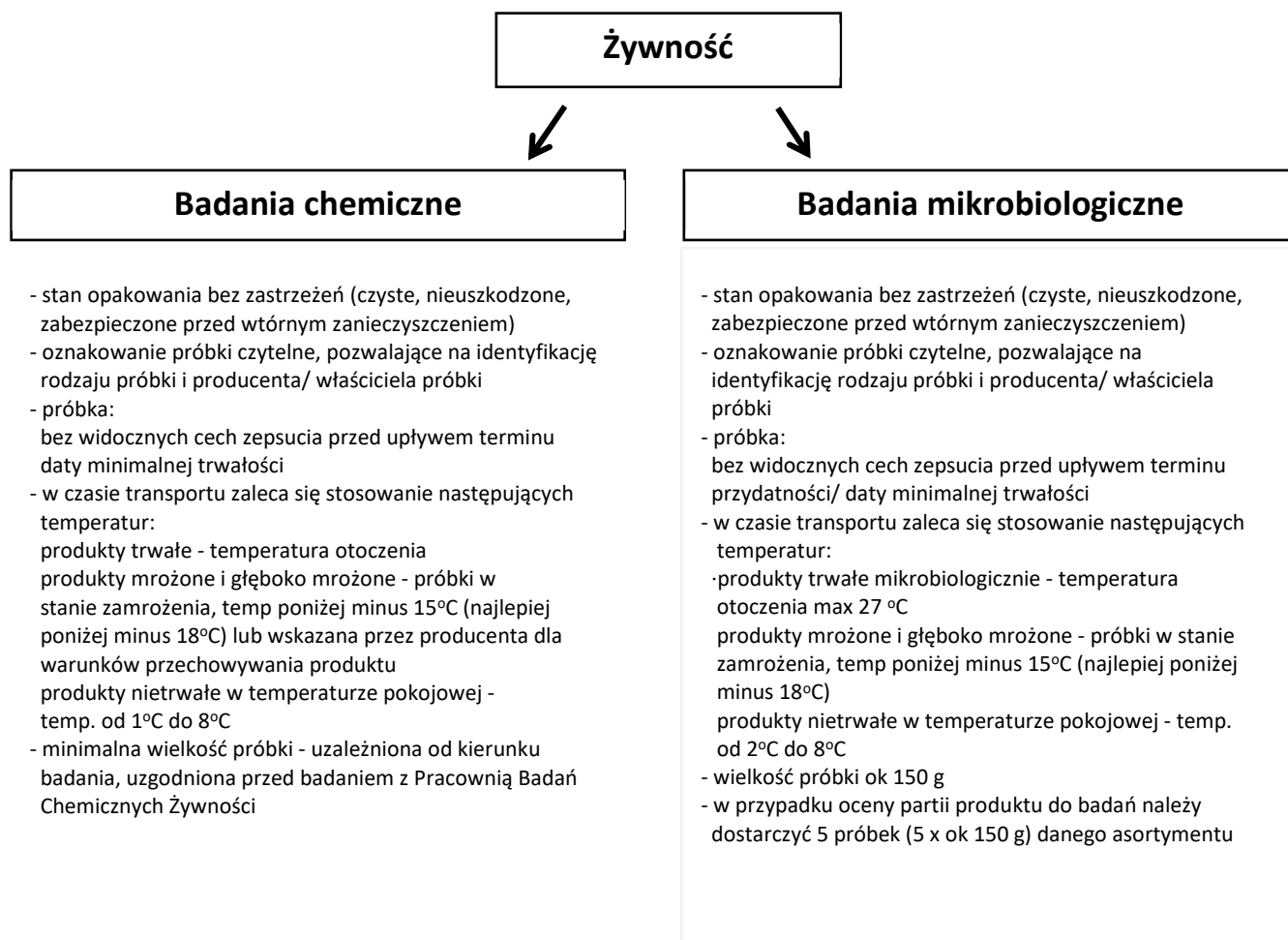

Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością



Badania chemiczne

- w opakowaniu oryginalnym, nieuszkodzonym, z oryginalną etykietą
- próbki przepakowane z opakowań zbiorczych: nieuszkodzone, szczelnie zapakowane, z dołączoną etykietą
- próbki czyste, bez obcych zapachów
- wielkość próbki - uzgodniona przed badaniem z Pracownią Badań Materiałów i Wyróbów do Kontakt z Żywnością
- próbka transportowana w temp. otoczenia

Produkty kosmetyczne



Badania mikrobiologiczne

- w opakowaniu oryginalnym, nieuszkodzonym, z oryginalną etykietą
- wielkość próbki nie mniej niż 20 g/ml
- próbka transportowana w temp. otoczenia
- przed upływem terminu przydatności

Analiza Instrumentalna



Badania AAS, ICP-MS, AMA

- próbki/mineralizaty/zakwaszone wody: w pojemnikach/ butelkach z HDPE ewentualnie PTFE lub dla ultra niskich poziomów metali PFA, FEP (w zależności od matrycy i techniki pomiarowej)
 - w kolbach miarowych ze szkła borokrzemowego o obj. 10 - 100 ml (w zależności od matrycy i techniki pomiarowej)
- Pojemniki, kolby, butelki odpowiednio oznakowane dostarczone na tackach, w statywach lub pojemnikach zbiorczych odizolowane od wpływu otoczenia



Badania chromatograficzne GC, GC-MS, HPLC

- próbki/ekstrakty w wialkach chromatograficznych o obj. 1,5-15 ml (w zależności od matrycy i techniki pomiarowej)
- kolby miarowe o obj. 2-50 ml szkło oranżowe (w zależności od matrycy i techniki pomiarowej)
- butelki szklane o poj. 250 ml z ciemnego szkła i korkami z dopasowanym szlifem (benzen w wodzie)